

Isolierhauben Serie HM-IRB3 und HM-IRU3

beheizt bis 450°C oder unbeheizt,
gehäkelt oder aluminiumbeschichtet



- für Rundkolben einsetzbar bis zu 3 Hälsen
- zum Ausgleich von Wärmeverlusten an der oberen Kolbenhälfte.
- besonders geeignet, um Kondensation und damit eine Rückkühlung zu verhindern sowie gewünschte Kolbeninhaltstemperaturen auch über 250°C zu gewährleisten.
- flexibler Glasseide-Heizkörper
schonende Behandlung der Glasgefäße
- qualitativ hochwertige Ausführung
von Hand gehäkelt
- Serie HM-IRB3 als beheizte Ausführung
für Betriebstemperaturen bis 450°C Serie
- Serie HM-IRU3 als unbeheizte Ausführung



*unsere Heizhauben erfüllen die Anforderungen nach
den europäischen Richtlinien auf Basis harmonisierter
Normen*



Technische Daten


HM-IRB3 (beheizte Ausführung)

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Heizzonen	1
Schutzart	IP 00
Heizleitertemperatur	max. 450°C
Netzanschlussleitung	1,5 m mit Schukostecker und Ein-/Ausschalter inkl. Personenschutzschalter

Heizzonenschaltung

Schalterstellung

0 1

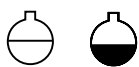

1 Heizzone

Leistung

0 1/1

Bestelldaten

Inhalt ml / l	Glaskolben Ø mm	Leistung W	Art.-Nr. HM-IRB3 (beheizte Ausführung)	Art.-Nr. HM-IRU3 (unbeheizte Ausführung)
100	64	30	96500100	96400100
250	85	40	96500250	96400250
500	105	60	96500500	96400500
1	131	100	96501000	96401000
2	166	150	96502000	96402000
3	185	200	96503000	96403000
4	207	250	96504000	96404000
5	223	300	96505000	96405000
6	236	350	96506000	96406000
10	279	450	96510000	96410000
20	345	650	96520000	96420000

Zubehör

Wir liefern ein auf unsere Heizhauben abgestimmtes Programm an Steuer- und Regelgeräten.

MOHR & CO
Laborhandelsgesellschaft mbH

D-69181 Leimen
Gottlieb-Daimler-Straße 2

Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94
Fax + 49 (0) 6224 7 70 12

info@labo-mohr.de
www.labo-mohr.de